

機械器具 61 歯科用ハンドピース
ストレート・ギアードアングルハンドピース 70692000
管理医療機器

特定保守管理医療機器 コントラアングルハンドピース N P B


【禁忌・禁止】

回転中、プッシュボタンが押されないよう注意すること。

〔やけどのおそれ〕

曲がったバー、傷の付いたバー、変形したバー、規格に合わないバーは使用しないこと。〔バー破損によるけがのおそれ〕

【形状・構造等】

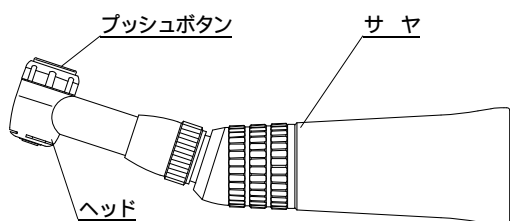

NPB - E

コントラアングルハンドピース NPBにはサヤの減速比及び接続するハンドピースやモーターのジョイント形状の違いによりNPB - E以外にも以下のような種類があります。

NPB - U、NPB - SC、NPB - E 4 R、NPB - E 10 R
NPB - E 16 R

【性能・使用目的】

1) 性能

| 販 売 名 | コントラアングルハンドピース NPB |
|------------|--------------------------|
| 許容入力最高回転速度 | 40,000 min ⁻¹ |
| 使 用 バ ー | 2.35 コントラバー |
| チャック方式 | プッシュボタン式 |

2) 使用目的

バー又はポイントを取り付け、歯牙、義歯、床、冠等の切削、研磨作業を行う。また、エンジン用ファイルを取り付け、根管拡大作業を行う。

【操作方法又は使用方法等】

詳細については取扱説明書を参照すること。

サヤのジョイント形状に合ったマイクロモーター、エアーモーター、ハンドピースへ取り付ける。

バーの切り欠きと軸の形状を合わせてバーを押し込みバーを取り付ける。

モーターを回転させ使用する。

バーを取り外す際は、プッシュボタンを押すことによりバーを取り外すことができる。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を参照すること。

有資格者による歯科領域の治療にのみ使用のこと。

バーの着脱は回転が完全に止まってから行うこと。

バー製造業者が出している個々のバーの許容回転数に従うこと。

曲がったバー、傷の付いたバー、変形したバー、規格に合わないバーは使用しないこと。

回転中、プッシュボタンが押されないよう注意すること。

使用する前に口腔外で空回転させ、振動、音、温度（発熱）等に異常を感じたら使用を中止すること。

使用中異常を感じたら直ちに使用を中止し、販売店へ連絡すること。

バーが確実に装着されているか確認してから使用すること。

酸化電位水、または滅菌液での洗浄、浸漬、拭き取りは行わないこと。

落下させるなど強い衝撃を与えないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1) 貯蔵・保管方法

水のかからない場所に保管すること。

気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。

2) 耐用期間

製造の日から、正規の保守点検（消耗部品の交換）を行った場合に限り7年間とする。

【保守・点検に係わる事項】

詳細については取扱説明書を参照すること。

132 で15分又は121 で20分のオートクレーブによる滅菌を行うこと。

しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に装置が正常且つ、安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

株式会社 ナカニシ

住 所：〒322-8666

栃木県鹿沼市下日向700

TEL：0289-64-3380

FAX：0289-62-5636